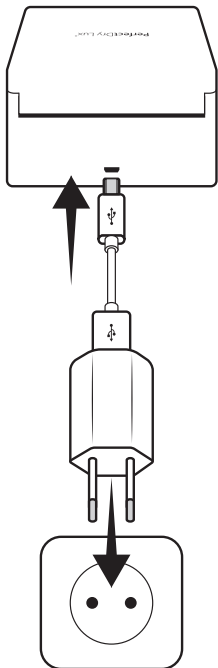


**1**

1. Napravo PerfectDry Lux® priključite. Modri svetlobni indikator na sprednji strani prikazuje, da je naprava vključena. V kolikor ne začnete postopka sušenja v naslednjih 30 sekundah, se bo svetlobni indikator ugasnil.

**2**


2. Preden slušne aparate vstavite v PerfectDry Lux®, jih obrišite s čistilnim robčkom in tako odstranite morebitno umazanijo. Nato odprite baterijske predalčke slušnih aparatov (baterije lahko ostanejo v predalčkih med ciklom sušenja) in zaprite pokrov naprave PerfectDry Lux®.

**3**

3. Za pričetek sušilnega cikla pritisnite tipko. Modri svetlobni indikator utripa počasi, kar pomeni, da naprava deluje.

Sušilni cikel se bo izvajal le, ko bo pokrov zaprt.


PerfectDry Lux® se po zaključku sušilnega cikla (30 minut) samodejno ugasne. Svetlobni indikator se bo prav tako ugasnil.

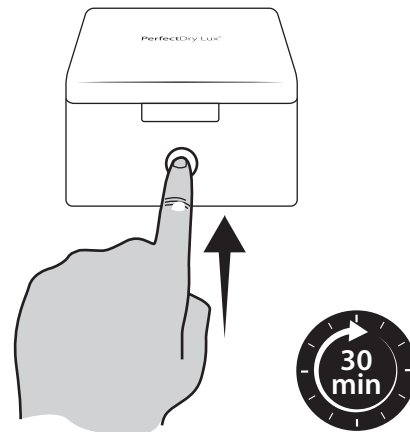

Poskrbite, da je pokrov naprave zaprt pred pričetkom sušilnega cikla.

Poskrbite tudi, da pokrova naprave ne odpirate med delovanjem. V kolikor boste to storili se bo naprava PerfectDry Lux® izključila (varnostna funkcija).

## Pomen svetlobnih indikatorjev

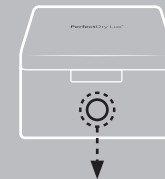

MODRA utripa >

Delovanje v teku

MODRA sveti >

V pripravljenosti

## Podatki za identifikacijo

Te informacije se nahajajo na spodnji strani naprave PerfectDry Lux®.

### Pomen kratic:

V Volt (napajalna napetost)  
A Amper (Poraba energije)

Simbol za USB napajanje

Za notranjo uporabo

Ta proizvod je iz ABS proizvodnje, reciklirane do 7%

Ta izdelek je skladen z veljavnimi Evropskimi direktivami.

**REKILIRANJE**  
Zastarele naprave odstranite na ekološki način.

Naprava je narejena iz materiala, ki ga je potrebno reciklirati. Bodite previdni, da odsluženo napravo razvrstite v pravi sistem recikliranja.

Dobavitelj za Slovenijo:

**AUDIOBM**

Info telefon: 059 044 055

E-mail: info@audiobm.si

Spletna stran: www.audiobm.si

PerfectDry Lux®

## Opis funkcij

### UV-C razkuževanje

PerfectDry Lux® vsebuje kratkovalovno UV-C žarnico, ki s 360° razporeditvijo svetlobe doseže vse površine slušnega aparata.

Izpostavitve UV-C svetlobi omogoča uničenje 99% glivic in bakterij, ter bistveno zmanjša srbenje in infekcije v sluhovodu.

### Sušenje - Razvlažitev

PerfectDry Lux® vsebuje ventilator, ki vzpostavi sistem kroženja zraka, kar zmanjša čas sušenja in potrebno energijo. Temperaturo sušenja znotraj naprave nadzoruje elektronski sistem, ki omejuje temperaturo na 45°C in tako prepreči poškodbe slušnih aparatov, ki jih sušimo.

**PerfectDry Lux® je priporočeno uporabljati vsak dan, da bi tako zagotovili učinkovito delovanje in daljšo življenjsko dobo slušnih aparatov.**

### Skladnost z evropskimi predpisi

Ta naprava je v skladu z direktivami glede elektronskih naprav, zlasti z Direktivo 2014/35/EU.

## Tehnični podatki

### Lastnosti

Notranje mere DxVxG (mm): 70 x 21 x 51

Zunanje mere DxVxG (mm): 93 x 48 x 76

Teža (g): 144

UV-C valovna dolžina: 253,7nm

Največja moč: 4W

Moč v mirovanju: <0,04W

Programska oprema verzija: 00PDL-LOG-02.00

Pogoji skladiščenja: od -20° do 65°C

Število ciklov: 1

Temperatura sušenja: <45°C

Trajanje cikla sušenja: 30 min

Obratovalne temperature:

od 12° do 40°C

Priključek za napajanje

Vhod: 100 – 240 Vac 50-60Hz

Izhod: 5V DC

Priključki: USB kabel – mikro USB



## Varnostna navodila

PerfectDry Lux® lahko uporabljajo le osebe z normalnimi duševnimi sposobnostmi. Drugih omejitev za uporabnika ni. Hraniti izven dosega otrok. Vsak poseg, razen običajnega čiščenja in vzdrževanja, lahko opravi le serviser. PerfectDry Lux® napajalnika ali kabla nikoli ne dajajte v vodo oz. v katero drugo tekočino. Če je vtičak ali napajalni kabel poškodovan, naprave ne uporabljajte. Napajalni del zamenjajte z novim in originalnim.

Napravo PerfectDry Lux® postavite na stabilno in suho podlago. Nikoli ne glejte neposredno v UV-C svetilko, ki se nahaja v notranjosti sušilne komore. Napravo odklopite iz omrežja tako, da pri tem vlečete za vtičak in ne za kabel.

Za čiščenje PerfectDry Lux® nikoli ne uporabljajte detergenta ali jedkih sredstev. Vsaka uporaba, ki ni v skladu s temi navodili pomeni, da garancija ni več veljavna. Proizvajalec ne more nositi odgovornosti za škodo, ki nastane zaradi nepravilne ali malomarne uporabe izdelka.

### Nasveti za vzdrževanje


Očistite z mehko krpo. Za čiščenje PerfectDry Lux® ne uporabljajte močnih ali abrazivnih čistilnih sredstev. V sušilno komoro ne pršite nobenih tekočin. Kadar PerfectDry Lux® ne uporabljate, ga hranite z zaprtim pokrovom, da se izognete nalaganju nečistoč v in na napravi.

### Garancija

Za napravo PerfectDry Lux® velja 12 mesečna (napajalnik in napajalni kabel vključena) garancija od dneva nakupa. Za vse morebitne napake ali okvare, se obrnite na vaš slušni center. Za uveljavljanje garancije imejte s seboj račun. Garancija ne velja za kakršnekoli napake, ki nastanejo zaradi neupoštevanja teh navodil, za mehanske poškodbe, razlita tekočina, malomarnosti, pomanjkanja vzdrževanja, ali katerekoli druge krivde s strani uporabnika. Poleg tega garancija ne velja v primeru strele ali zaradi nihanja v električni napetosti. Kot previdnosti ukrep priporočamo, da napravo v primeru nevihte izključite iz električnega omrežja.

## Navodila za uporabo

PerfectDry Lux®

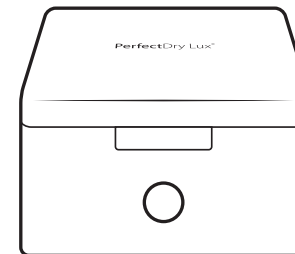

UV-C dezinfekcija in hitro sušenje slušnih aparatov

### Paket vsebuje:

- 1 PerfectDry Lux®
- 1 USB kabel
- 1 napajalni adapter
- 1 Navodila za uporabo

**AUDIOBM**