

# Ken

## Brezžični telefon z močnim ojačanjem

# Ken

- Visoka in prilagodljiva glasnost
- Čist, visoko kvaliteten zvok, ki vam omogoča jasne pogovore, v katerih boste uživali
- Prilagodljivo in ojačano zvonjenje, ki bo poskrbelo, da ne boste preslišali klicev
- Svetlobno opozarjanje za dohodne klice, vam omogoča, da vidite, kdaj zveni telefon
- Opozarjanje z vibriranjem na slušalki, vam omogoča, da začutite, kdaj zveni telefon
- Urejen, moderen dizajn omogoča preprosto uporabo in praktičnost
- Komplet vsebuje napajalni adapter, napajalno postajo in indukcijsko zanko silhueto, s kljukico za uho, katera omogoča direkten prenos zvoka v slušni aparat (slušni aparat nastavljen na T ali MT način)



Proizvajalec:  **Phonic Ear**<sup>®</sup>  
Connected to life

Kongebakken 9 • 2765 Smørum • Denmark

Phone: +45 3917 7101 • Fax: +45 3927 7900

E-mail: [mail@phonicear.com](mailto:mail@phonicear.com)



For more information visit  
[www.phonicear.com](http://www.phonicear.com)

Dobavitelj za Slovenijo:

# AUDIOBM

Info telefon: 059 044 055  
E-mail: [info@audiobm.si](mailto:info@audiobm.si)  
Spletna stran: [www.audiobm.si](http://www.audiobm.si)

**MultiSens**



Ojačana glasnost

Vibriranje

Svetlobni alarm



92 1-30-710-00 Rev. A 0307

© 2007 Phonic Ear A/S

For more information visit [www.phonicear.com](http://www.phonicear.com).

**MultiSens**



**Ojačana glasnost**

**Vibriranje**

**Svetlobni alarm**




*Ken*

Ken vključuje novo tehnologijo brezžičnih telefonov. Stilski, praktični dizajn omogoča preprosto uporabo, zasnovan pa je tudi tako, da ga zlahka uporabljajo tudi naglušni. Na dohodne klice opozarja na več različnih načinov kot so vibriranje, svetlobni indikator ter prilagodljivo ojačano zvonjenje. Telefon si lahko prilagodite glede na vaše potrebe in si zagotovite, da ne boste preslišali nobenega klica vaših prijateljev ali družinskih članov. Xen telefon je prenesen tako, da ga imate lahko vedno pri sebi, okoli vašega doma ali na vrtu. Ne bo vam več potrebno hiteti nazaj v hišo, da bi se oglasili na klic. Slušalka s posebnim ojačanjem zgotavlja, da boste vi in ostali družinski člani uživali v jasnih pogovorih.

Dejanska velikost



*Ken*

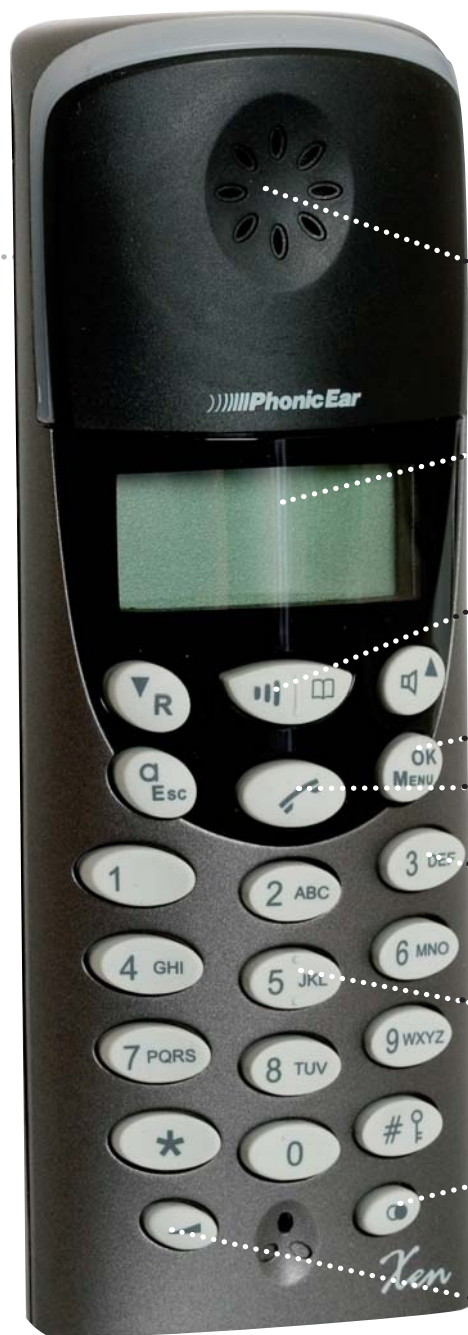

Močan, prilagodljiv zvočnik zagotavlja jasne in čiste pogovore.

Osvetljen zaslon omogoča povečavo znakov in boljšo vidljivost.

Tipka za ojačanje glasnosti hitro in preprosto ojača glasnost na maksimalni nivo, tako, da ga lahko uporabljajo naglušni kot tudi dobro slišiči člani družine. Gumb ima tudi rahlo izboklino, tako da jo je moč začutiti tudi med pogovorom.

Telefon lahko nastavite glede na lastne potrebe vključno z vibriranjem in svetlobnim opozarjanjem.

Tipka za klicanje in oglašanje se nahaja na sredini slušalke, tako da jo je preprosto najti.

Visok kontrast med telefonom, tipkami in števkami omogoča, da lažje razberete vsebino tipk.

Dve izboklini na tipki s številko 5 omogoča, da jo zlahka začutite in se bolje orientirate po tipkovnici.

Tipka za hitro klicanje omogoča, da lahko hitro ponovno pokličete zadnje klicane številke.

Glasnost zvočnika se lahko postopoma povečuje po potrebi glede na okolje, glas klicatelja ter vaš sluh.

## opis

Xen vključuje novo tehnologijo brezžičnih telefonov. Stilski, praktični dizajn omogoča preprosto uporabo, zasnovan pa je tudi tako, da ga zlahka uporabljajo tudi naglušni. Na dohodne klice opozarja na več različnih načinov kot so vibriranje, svetlobni indikator ter prilagodljivo ojačano zvonjenje.

## namen

Telefon Xen je posebno zasnovan tako, da zagotavlja visoko kvaliteto zvoka uporabnikom slušnih aparatov kot tudi tistim, ki jih ne uporabljajo. Telefon Xen se poslužuje DECT tehnologije (Digitalno Ojačana Brezžična Telekomunikacija), ki zagotavlja digitalno kvaliteto zvoka, uporabniku prijazno obliko ter obilo funkcij.

## prednosti

- Ojačana in prilagodljiva glasnost zvočnika
- Opozarjanje na dohodne klice je lahko zvočno, svetlobno ali z vibriranjem
- Visoka glasnost zvonjenja
- Kompatibilnost s slušnimi aparati, silhueta - ušesna kljukica z vgrajeno indukcijsko zanko, ki uporabniku nudi dodatno fleksibilnost pri uporabi (slušni aparat naj bo nastavljen na T ali MT način)
- Močno osvetljen zaslon
- Močno osvetljene in pregledne tipke

## Lastnosti

# Xen

**Brezžični telefon z močnim ojačanjem, vibriranjem in svetlobnim indikatorjem**



## Tehnični podatki

Nivo akustičnega zvočnega pritiska:	107 dB SPL @ 1 kHz
Moč magnetnega polja:	17 dB @ 1 kHz rel. 100mA/m
Baterije:	2 x 1.2V 600mAh AAA, LR03, E92 NiMH
Čas polnjenja:	15 ur (rdeča lučka na postaji naznanja, da se napravi polni)
Zvonjenje:	5 nivojev glasnosti (vključno z OFF) 9 poljubnih melodij
Več slušalk: Zunanji domet signala:	do 5 slušalk* do 300 metrov
Identiteta klicatelja:	samodejna zaznava FSK & DTMF arhiv 30 klicateljev (10 znakov, 25 števil)
Telefonski imenik:	50 telefonskih števil
Dimenzije: Slušalka Postaja:	135,5x48x36,5mm 105x143x78mm
Teža: Slušalka Postaja/Slušalka:	100g brez baterij (125g z baterijami) 140g/160g
LCD zaslon:	3 vrstice (10 znakov, 12 števil, ikon)
Stanje pripravljenosti / pogovori:	100 ur/11 ur


## Dotatki



LR03 baterije, AAA, E92  
2 x LR03



Napajalni adapter  
EU: 890-88-023-00  
UK: 890-88-025-00

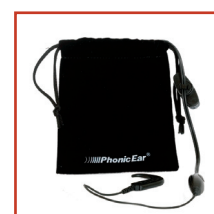

Silhueta za eno uho  
200-04-001-00  
Silhueta za oba ušesa  
200-04-002-00

\* V splošnem je vaš telefon (postaja in slušalka) kompatibilen z vsemi vrstami digitalnih brezžičnih telefonov v DECT sistemu. (GAP kompatibilnost). Priporočljivo pa je, da so vse slušalke povezane s postajo istega proizvajalca za doseg optimalnega delovanja in funkcionalnosti.



**Ojačana glasnost**  
**Vibriranje**  
**Svetlobni alarm**